



## GENIUS PEDIATRICO COD. 6050/P

Con il sistema BROSELOW, il carrello è suddiviso in cassetti ciascuno dei quali ha un codice colore corrispondente ad uno dei diversi intervalli di statura e d'età del bambino. Ciascun cassetto, contiene tutto il materiale necessario per la rianimazione di un paziente compreso in quel range di statura ed età, inclusi i farmaci già predosati.

SCocca – Struttura realizzata in acciaio verniciato spessore 10/10, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanici, antigraffi o, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Il processo di verniciatura è conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

PARTE SUPERIORE – Piano di lavoro in ABS autoestinguente, antimacchia e antigraffio, di facile pulizia, lavabile e disinfettabile, dimensioni 520x400x60 h mm, con bordo perimetrale contenitivo su tre lati.

PARTE FRONTALE – Cassetti estraibili in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche, ad estrazione totale con rientro automatico; sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma in alluminio, fermo blocco fine corsa e chiusura a scatto per evitare l'apertura in fase di spinta. Serratura a chiave centralizzata.

Configurazione standard dei cassetti:

- 4 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x75 h mm;

- 5 cassetti in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm;

La configurazione dei cassetti può essere modificata su richiesta.

Altezze dei cassetti disponibili: 100, 150, 200, 250, 300, 350 o 400 mm (altezza totale della cassettiera: 800 mm).

LATO SINISTRO – Maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in alluminio con terminali in plastica.

BASE – Doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in tecnopolimero. 4 ruote termoformate piroettanti antistatiche in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche

Dim.650x600x1110 h mm


**Posizione 1**

Rev. 01 del 28/12/2022

SCHEDE TECNICHE



## ACCESSORI CONSIGLIATI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

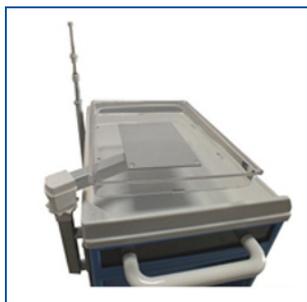

**COD. 60501**

Pos: 2  
**SUPPORTO PER DEFIBRILLATORE**

Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor.

Dim. 410x325x40 h mm



**COD. 6041**

Pos: 3  
**ASTA PORTAFLEBO ESTENSIBILE**

Asta portaflebo a 4 ganci molto resistenti realizzati in tecnopolimero, regolabile in altezza con una sola mano e di semplice installazione sul carrello grazie a due supporti in acciaio verniciato

Dim. 1123/2100 h mm



**COD. 70120**

Pos: 4  
**PIASTRA MASSAGGIO CARDIACO**

Piastra cardiomassaggio in plexiglas di facile e intuitiva estrazione in modo da rendere rapido l'intervento, completa di guide per l'alloggiamento.

Dim. 600x430x8h mm



**COD. 60663**

Pos: 5  
**SUPPORTO BOMBOLA VERNICIATO**

Supporto in acciaio verniciato porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt, completo di cinturino di contenimento universale e regolabile.



**COD. 6046-A**

Pos: 6  
**PORTA CATETERI GRIGIO ABS**

Porta cateteri-sondini in tecnopolimero.

Dim. 125x70x475 h mm



**COD. 6042**

Pos: 7  
**PORTARIFIUTI AP.GINOC.10LT**

Porta rifiuti in tecnopolimero autoestinguente, asportabile e con apertura a ginocchio. Capacità 10 litri


Dim. 200x250x340 h mm



**COD. CHS**

Pos: 8  
**CHIUSURA CON SISTEMA SIGILLO**

Cilindro di chiusura centralizzata dei cassetti con sistema a sigillo, pratico ed ergonomico permette una facile e contemporanea chiusura di tutti i cassetti

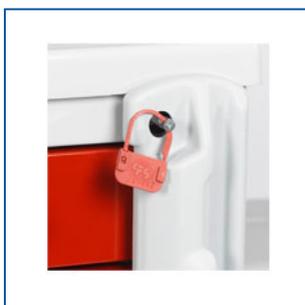

**COD. 6064**

Pos: 9  
**SIGILLO NUMERATO CONF.100PZ.**

Confezione da 100 sigilli colorati, numerati progressivamente